


Difference entre la **floculation** et l'**agglutination** dans le test au Rose Bengale



Une réaction véritablement positive au test Rose Bengale montre une agglutination granulaire nette des cellules *Brucella* colorées et un fond plus clair et décoloré.

La floculation ou la précipitation non spécifique se manifeste par de grosses particules irrégulières « floccs » avec un fond plus sombre. L'apparence de floculation n'est pas une réaction antigène-anticorps spécifique et le résultat doit être interprété comme indéterminé.

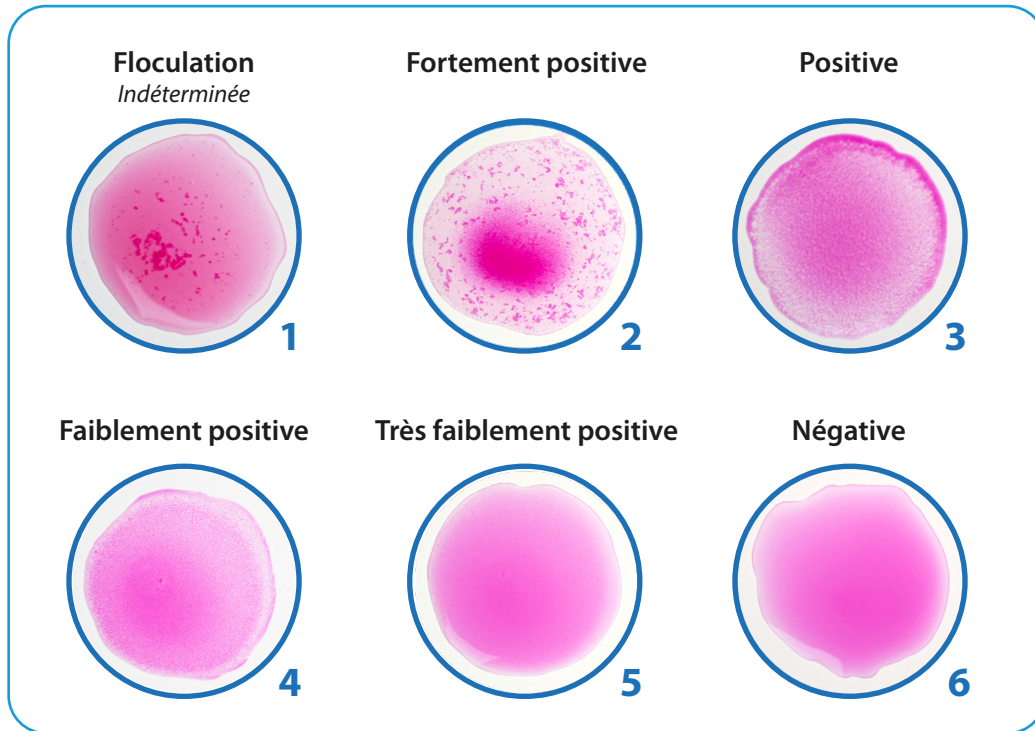

Référence: 22202
Version: 001
Date: 03/02/2026